




**Beispiel: Display-Bild Programm Parese**  
(Abbildung entspricht in etwa der Display Originalgröße)

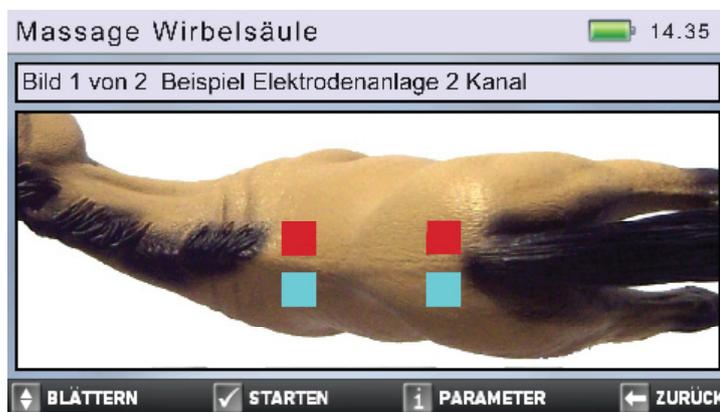

**Beispiel: Display-Bild Programm Massage Wirbelsäule Pferd**  
(Abbildung entspricht in etwa der Display Originalgröße)

**Das Bessere ist der Feind des Guten!**

## AmpliMove *animal*

Nachfolger des bewährten Amplimed synchro

**Die neue Dimension  
der Mittel-Frequenz-Therapie!**

**Erkrankungen des Bewegungsapparates  
noch effizienter Therapieren**

**69 Veterinär-Programme**

**Umschaltbar auf 45 Human-Programme**

**AmpliMove animal** ist ein echtes digitales 2 Kanal Mittel-Frequenz Therapie Gerät.

**AmpliMove animal** verfügt über 5 neue, innovative Programmgruppen die erst durch die neue digitale Gerätearchitektur realisierbar wurden. Auf diese 5 Programmgruppen verteilen sich 54 effiziente Therapie-Programme.

**AmpliMove animal** zeichnet sich durch eine einfache, intuitive Bedienung aus.

Die Elektrodenanlage für das jeweilige Programm wird als Bild im Display angezeigt.

Die bewährten **15 Programme** des **AmpliMed-synchro** sind als eigenständige Programmgruppe in dem AmpliMove animal integriert.

**AmpliMove animal** bietet die Möglichkeit eine Vielzahl von individuellen Anwenderprogrammen (User-Programmen) selbstständig zu programmieren. Gerne erstellen wir auch nach Ihren Wünschen und den von Ihnen vorgegebenen Parametern Ihr ganz spezielles Userprogramm. Ein Update ist durch den integrierten USB-Anschluss ganz einfach.

**AmpliMove animal** kann mit dem integrierten **Lithium Ionen Akku**, aber auch mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzladegerät betrieben werden.

**Weitere Highlights umseitig!**

**AmpliMove animal**

ist ein **Medizinprodukt** der Klasse IIa, nach Anhang IX der Richtlinie 93/42 EWG über Medizinprodukte!

# AmpliMove *animal*

## Highlights!

Niederfrequenz einstellbar von 1Hz bis 100Hz

Mittelfrequenz einstellbar von 2000Hz bis 10000Hz

Schwellmodulation einstellbar von 0-100%

Reiner Mittelfrequenzbetrieb ohne  
Niederfrequenzanteile

Die 5 am meisten genutzten Programme werden  
automatisch unter Favoriten gespeichert.

Die neuen Programme des AmpliMove:  
(30 Programme in 5 Programmgruppen)

spezielle Massageprogramme

unterschiedliche Gewebetrophik-Programme

spezielle Inkontinenz-Programme wie z. B.:  
Parasakrale Stimulation (Harn und Stuhlinkontinenz)  
Obstipation (Verstopfung)

effiziente Programme zur Muskelstimulation, auch  
nutzbar zur Leistungsoptimierung bei Sportpferden  
und im Hundesport z. B.:

- Konditionstraining allgemein
- Konditionstraining spez. atrophierter Muskeln
- Krafttraining
- Training spastischer Muskeln
- Training paretischer Muskeln

verschiedene Schmerztherapie-Programme

### Elektrodenerkennung


Erkennt ob die Elektroden Hautkontakt haben und zeigt  
dies an

Lieferumfang (Basisausstattung):

AmpliMove im stabilen Kunststoffkoffer  
Netzladegerät für Betrieb des AmpliMove und Laden  
der Akkus.

2x Elektrodenanschlusskabel je 2,5m

Beispiele verschiedener Therapieprogramme  
in der Display-Ansicht  
(Abbildungsgröße entspricht in etwa der Display Originalgröße)

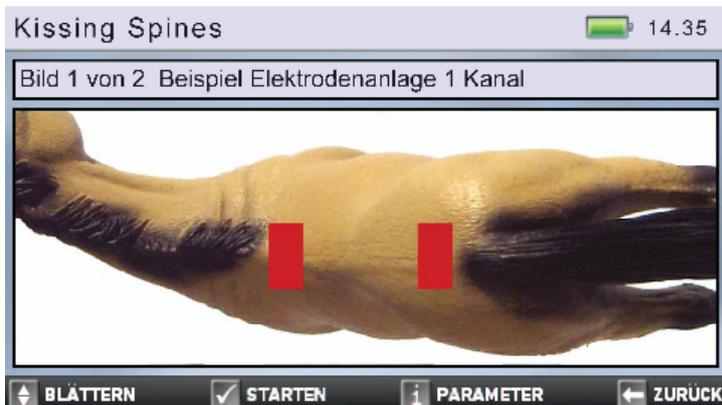

Kontakt: KNOP GmbH Medizintechnik • Borngasse 9 • 35630 Ehringshausen

Tel: 06443 - 83 33 230 • Fax: 83 33 232 • www.knop-medizintechnik.de • info@knop-medizintechnik.de